

Padronização que independe do operador.

O esfregaço manual varia com a mão, o ângulo e a velocidade de quem o faz. O EZ Prep executa a distensão com movimento microcontrolado e perfil de velocidade constante — o mesmo resultado, lâmina após lâmina.

50 lâminas por carga no rack

2–4 µL de sangue total por esfregaço

1,5 kg compacto, para qualquer bancada



Empresa 100% brasileira transformando o futuro do diagnóstico!

Na HemaVision IVD do Brasil, aliamos criatividade, engenharia de precisão e tecnologia para transformar a rotina laboratorial. Não entregamos apenas máquinas; entregamos qualidade, agilidade, confiança e soluções inovadoras que garantem decisões clínicas mais seguras.

Como indústria nacional, temos o orgulho de desenvolver tecnologia própria para diagnóstico in vitro, focada na máxima eficiência de processos automatizados. Nosso compromisso se traduz na prática: cultivamos relações de confiança baseadas na transparência, no rigor técnico e no desempenho superior.

SITE www.hemavision.com.br

E-MAIL comercial@hemavision.com.br

HemaVision IVD do Brasil Ltda.

 +55 11 92097.8135

 [hemavision.ivd](https://www.instagram.com/hemavision.ivd)

 comercial@hemavision.com.br




HEMATOLOGIA • ESFREGAÇO
AUTOMATIZADO

EZPREP

**Preparador automático de esfregaços
sanguíneos**


Do sangue total ao esfregaço padronizado, com
um toque.

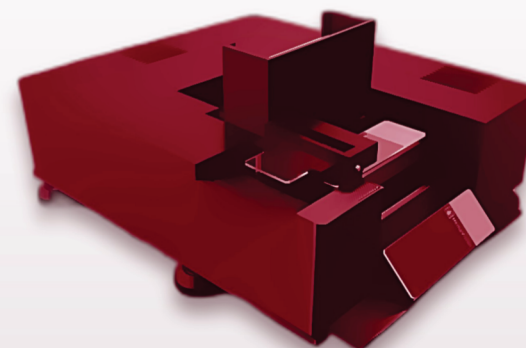

PROTÓTIPO — Produto em processo de registro na
ANVISA. Não disponível para comercialização.

PRECISÃO

Ajuste a cada amostra

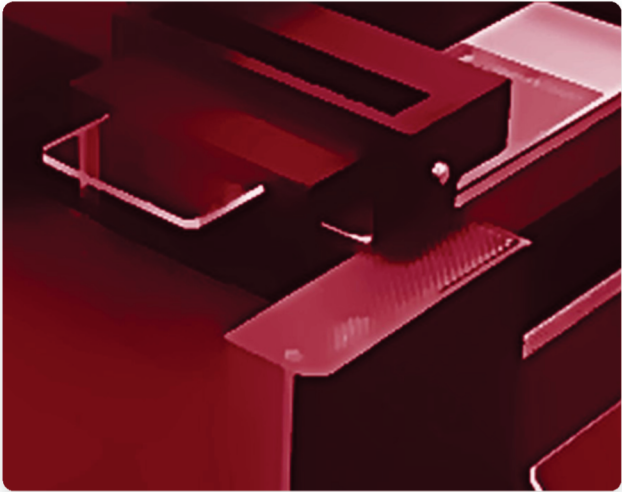

A extensora distende o esfregaço com movimento microcontrolado e velocidade ajustável ao hematócrito da amostra — o mesmo padrão, lâmina após lâmina.

POR QUE EZ PREP

Diferenciais

- ◆ **Precisão microcontrolada.** Perfil de velocidade controlado para esfregaços reproduzíveis.
- ◆ **Ajuste ao hematócrito.** Compensação em até 10 velocidades da extensora, adequando o esfregaço a diferentes hematócritos.
- ◆ **Padronização.** Elimina a variabilidade entre operadores.
- ◆ **Autonomia.** Carga de 50 lâminas por ciclo de trabalho.
- ◆ **Higiene simples.** Extensora reutilizável em posição fixa, de fácil limpeza manual.
- ◆ **Compacto e leve.** 1,5 kg; ocupa o mínimo de bancada.

FICHA TÉCNICA

Especificações

Capacidade do rack	50 lâminas
Tipo de amostra	Sangue total
Volume de amostra	2–4 µL
Velocidade da extensora	Compensação de hematócrito · até 10 velocidades
Rendimento	15 s por lâmina
Consumo	<15 W · standby <2 W
Alimentação	12 Vcc · fonte externa multivolt
Dimensões (C×L×A)	23,5 × 19 × 8 cm
Peso	1,5 kg
Consumível	Lâminas HemaVision